

rombica


### Массажный пистолет

Wellness Impulse

ID: MSG-003


#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии Wellness. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

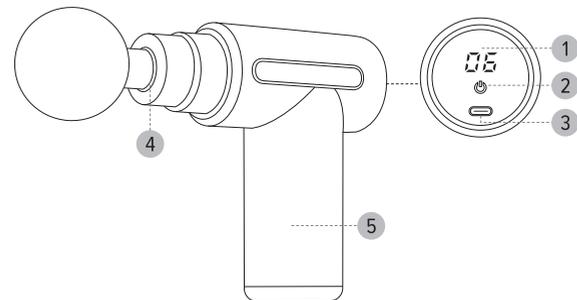

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. LCD-дисплей (Внимание: на LCD-дисплее установлена защитная пленка, при необходимости снимите ее)
2. Кнопка питания
3. Разъем Type-C для зарядки встроенного аккумулятора
4. Гнездо для установки насадок
5. Рукоять массажера
6. Конусообразная насадка – используется для массажа малых групп мышц, массажа вокруг суставов, массажа стоп
7. Плоская насадка – универсальная насадка, используется для массажа любой группы мышц
8. Y-насадка – используется для массажа шейного отдела и позвоночника
9. Круглая насадка – используется для массажа крупных групп мышц (спина, ноги)

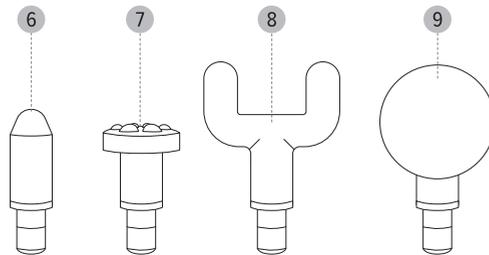

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность устройства: 30 Вт
Питание: от встроенного аккумулятора
Вход: Type-C 5B / 1A
Емкость встроенного аккумулятора: 2400 мАч / 3.7 В
Комплектация: массажер, USB-кабель, насадки (4 штуки), документация

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

##### ВКЛЮЧЕНИЕ

Коснитесь и держите кнопку питания. Включившийся LCD-дисплей подтвердит включение.

##### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Коснитесь и держите кнопку питания. Выключившийся LCD-дисплей подтвердит выключение.

#### УСТАНОВКА НАСАДОК

Выберите одну из насадок из комплекта поставки и установите ее в гнездо для установки насадок до упора. Перед установкой насадки убедитесь, что устройство выключено.

#### УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ РАБОТЫ

Коснитесь кнопки питания, чтобы переключить уровень интенсивности. Цифра на LCD-дисплее отображает текущий уровень интенсивности.

#### ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 8 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к Type-C разъему устройства. Затем подсоедините USB кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки на LCD-дисплее отображается текущий процент заряда аккумулятора.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1. Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов. При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
2. Не рекомендуется использование массажера в травмированных зонах.
3. Устройство разработано для массажа различных частей тела. Не пытайтесь использовать устройство для других целей.
4. Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными возможностями без присмотра ответственного лица.
5. Если вы перенесли инсульт, или страдаете от гипертонии / гипотонии – обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
6. Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
7. Если вы почувствовали дискомфорт при использовании устройства – немедленно прекратите использование.
8. Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
• отеки, воспаления, застой крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
• вы перенесли операцию в тех местах, где планируете использовать устройство;
• у Вас плохое физическое состояние;
• у Вас серьезное повреждение кожи или кожная болезнь.
9. Не рекомендуется использовать устройство беременным, кормящим женщинам, детям, людям преклонного возраста. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.

- 10. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1А
11. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
12. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
13. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
14. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
15. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильному ударам.
16. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
17. Обязательно выключайте устройство после использования.
18. При отсоединении кабеля от устройства никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
19. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
20. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
21. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
22. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.



Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: массажер для тела.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для ударного массажа различных частей тела. Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: "Веньчжоу Хуифан Электрик Эпплайенсес Ко. Лтд." Но. 192, Сюацзянь Роад, Ванцюань Таун, Пиньян Дистрикт, Веньчжоу Сити, Чжэцзян Провинс, КНР (Китайская Народная республика), Китай
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 11250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@d-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

##### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Blank form for warranty stamp with fields for 'Изделие', 'Модель', 'Серийный номер', 'Дата продажи' and a 'Печать продавца' (Seller's Seal) area.

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

#### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Table with 5 columns: №, дата, код ремонта, сервис, мастер. The table is currently empty.