




ID: MSG-010

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства, прочтите
это руководство и сохраните его
для использования в дальнейшем

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

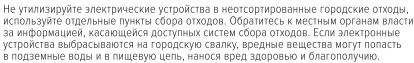

Назначение товара: массажер для глаз. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для массажа в области глаз посредством электрических импульсов и нагрева.

Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя.

Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес пр-ва: "Венчжоу Хуифан Электрик Эмплаimentс Ко. Лд." No. 192, Сюаньчэн Роад, Ванчжоу, Тунцзян, Пинцзян Дистрикт, Венчжоу-Сити, Чжэцзян Провинс, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Импортер: ООО "ЭО", адрес: 43441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилово, улица 69 км МКАД, стр. 1, офис 506.

Претензии от покупателей принимаются по адресу: ИМПОРТЕР.


Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятилетняя ул., д. 715, строение 2, этаж 5, офис 500.

Произведено: Китай. info@rombica.ru

Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAC3 037/2016.

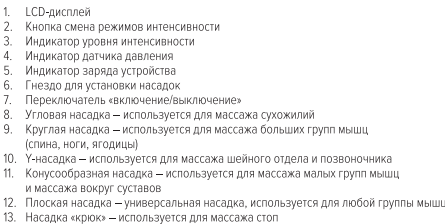

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы крепежа, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет ответственности за повреждения изделия, если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением к нему устройств, не предусмотренных производителем; воздействием механических повреждений, возникших после передачи изделия потребителю (разрушения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных).
4. Производитель не несет ответственности за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умственных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате пожара, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.

Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombic.ru

Полный список адресов технических центров производства, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombic.ru



Мощность устройства: 60 Вт
Питание: от встроенного аккумулятора
АС адаптер: 220 В, 50 Гц / 25.2 В, 1 А
Емкость встроенного аккумулятора: 2500 мАч / 3.7В
Комплектация: устройство, документация, АС адаптер, насадки (6 штук), кейс

Переместите переключатель питания (7) в положение «On», устройство войдет в рабочее состояние и будет находиться в первом режиме работы. Включение дисплея подтвердит включение устройства.

Переместите переключатель питания (7) в положение «Off», устройство выключиться. Дисплей погаснет.

Выберите одну из насадок из комплекта поставки и установите ее в гнездо для установки насадок (6) до упора. Перед установкой насадки убедитесь, что устройство выключено.

Слегка нажмите кнопку смены режимов (2) для поочередного переключения между режимами интенсивности. Количество включенных световых ламп отображает текущий уровень интенсивности, где одна лампа будет обозначать, что включен первый уровень, две – второй и так далее.

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите устройство и подключите сетевое зарядное устройство к входу DC IN устройства. Затем подключите зарядное устройство к сети 220В. Уровень заряда устройства отображен на индикаторе заряда устройства [5]. Если уровень заряда равен 100% – зарядка окончена.

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеуказанными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

№	дата	код ремонта		сервис	мастер	клиент

1. Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов. При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
2. Не рекомендуется использование массажера в травмированных зонах.
3. Устройство разработано для массажа различных частей тела.
 - Не пытайтесь использовать устройство для других целей.
4. Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными способностями без присмотра ответственного лица.
 - Если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии/гипотонии – обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
5. Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
7. Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства – немедленно прекратите использование.
8. Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
 - отеки, воспаления, заложенность, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
 - вы перенесли операцию в тех местах, где планируете использовать устройство;
 - у вас плохое физическое состояние;
 - у вас серьезное повреждение кожи или кожная болезнь.
9. Не рекомендуется к использованию беременными, кормящими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.
10. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1А.
11. Если устройство не используется в течение длительного времени, зарядите его раз в месяц.
 - Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
12. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
13. Не храните устройство рядом с открытым огнем и не держите аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого.
14. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
15. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
16. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
17. Обязательно выключайте устройство после использования.
 - При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
19. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
20. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов зарядки-разряда.
21. После превышения 500 циклов эффективность емкой аккумулятора может снижаться.
22. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
22. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.