

rombica

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ

Rombica Wellness Crystal


ID: MSG-012

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства, прочтите
это руководство и сохраните его для
использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопка питания (Вкл./Выкл.)/Регулировка режимов
2. Кнопка регулировки температура
3. Низкая температура
4. Средняя температура
5. Высокая температура
6. Индикатор вибрации
7. Индикатор Bluetooth-подключения
8. Индикатор заряда батареи
9. Корпус устройства
10. Складывающаяся конструкция
11. Застежка регулировки длины ремня для головы

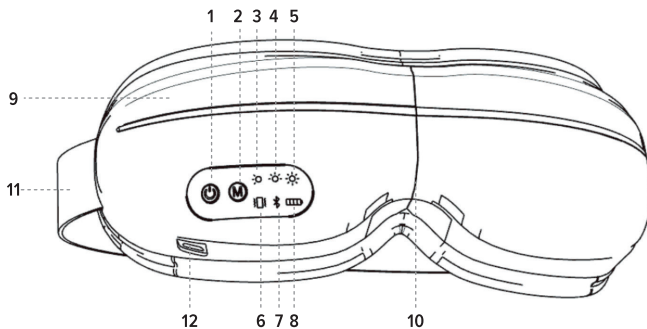

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность устройства: 3.5 Вт

Питание: от встроенного аккумулятора

Вход: micro-USB 5B/1A

Емкость встроенного аккумулятора: 1200 мАч / 3.7В

Количество режимов: 4

Материал: пластик, полиэстер

Комплектация: устройство, документация, USB-кабель

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите и держите кнопку питания (1), загоревшийся LED-индикатор подтвердит включение.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания (1), звуковой сигнал и загоревшийся LED-индикатор подтвердит выключение.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Устройство обладает четырьмя различными режимами работы: Energy, Relax, Relieve и Sleep.

Режим	Воздушно-компрессионный массаж	Согревающий массаж	Вибрация	Проигрывание музыки	Таймер
Режим «Energy»	+	+	+	+	10
Режим «Relax»	+	+		+	15
Режим «Relieve»	+	+			15
Режим «Sleep»	+			+	20

Для последовательного переключения режимов работы коротко нажимайте на кнопку питания/переключения режимов (1). Звуковой сигнал подтвердит переключение режима работы. Последовательное изменение температуры осуществляется коротким нажатием кнопки регулировки температуры (2).

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

Убедитесь, что устройство включено и откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет массажер, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «000», или другие для создания пары.

После создания пары между вашим устройством и массажером можно наслаждаться любимой музыкой.

Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите устройство и подключите USB-кабель к micro-USB разьему. Затем подсоедините USB-кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED-индикатор будет гореть пульсирующим светом. Когда LED-индикатор будет гореть непрерывно – зарядка окончена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов.
При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
2. Не используйте устройство на сухой коже. Перед использованием протрите места контакта на коже влажным полотенцем.
3. Устройство разработано для массажа в области глаз. Не пытайтесь использовать устройство для массажа других частей тела.
4. Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными способностями без присмотра ответственного лица.
5. Если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии/гипотонии – обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.

6. Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
7. Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства – немедленно прекратите использование.
8. Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
 - отеки, воспаления, застой крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
 - у вас серьезное повреждение кожи или кожная болезнь.
 - у вас плохое физическое состояние;
 - вы перенесли операции на глазах;
 - если вы страдаете от глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки или других глазных заболеваний.
9. Перед использованием убедитесь, что вы не в контактных линзах.
10. Не рекомендуется к использованию беременными, кормящими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.
11. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1А.
12. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
13. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
14. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
15. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
16. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
17. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
18. Обязательно выключайте устройство после использования.
19. При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
20. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
21. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
22. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
23. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
24. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: массажер для глаз.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для массажа в области глаз посредством электрических импульсов и нагрева. Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

