

SSIII SA

Имплантаты с полированной шейкой



OSSTEM[®]
IMPLANT


SS SA Поверхность и характеристики

OSSTEM SA Поверхность

SA: Пескоструйная обработка и травление кислотами

Увеличение площади поверхности имплантата путем пескоструйной обработки крупными частицами алюминия и травления сильными кислотами

- Шероховатость поверхности 2.5-3.0 мкр, в верхней части (0.5мм) шероховатость поверхности 0.5-0.6 мкр
- На поверхности имплантата созданы микро кратеры размером 1.3 мкр

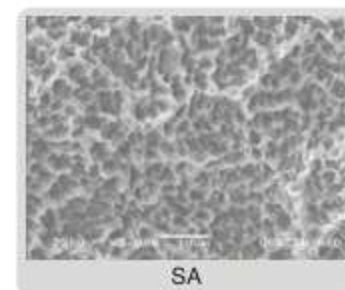

OSSTEM SA

SSIII SA Дизайн корпуса



- Имплантат непогружного типа с внутренним восьмигранным соединением и конусом Морзе 8°
- Винтовая резьба по всему телу имплантата, обработка поверхности SA
- Корневидное тело имплантата с углом конуса 1.5° для улучшенной первичной стабильности
- Превосходная первичная стабильность даже в условиях мягкой кости благодаря неглубокой резьбе в верхней части имплантата
- Штопорная резьба и активный апекс для улучшения эффекта самонарезания
- Ultra-wide идеально подходит для одномоментной имплантации после удаления зуба или отторжения имплантата
- Дизайн апекса оптимален для отличной первичной стабильности и в условиях постэкстракционной лунки

SSIII SA Полированная шейка - стабильность конструкции



- Более стабильная и надежная конструкция за счет прямого контакта коронки с имплантатом
- Снижается микроподвижность конструкции, так как жевательная нагрузка ложится на имплантат, а не на абатмент
- Минимальный риск выкручивания винта и поломки абатмента
- Установка по одноэтапному протоколу (формирователь десны не требуется)

SS SA Линейка размеров

SSIII SA Линейка размеров

Рекомендованная сила торка при установке: ≤ 40 Ncm

* Для установки в области моляров рекомендуется использовать имплантаты диаметром 4.5мм и более

Комплектация без установочного адаптера : (пример: SS3R4011S18)

Комплектация Имплантат + Установочный адаптер + Винт-заглушка :

A + код товара (пример: ASS3R4011S18)



R **W** Платформа

д Ø3.5
П Ø4.8



В/д \ д

8.5

10

11.5

13



1.8

SS3R3508S18

SS3R3510S18

SS3R3511S18

SS3R3513S18

д Ø4.0
П Ø4.8



В/д \ д

7

8.5

10

11.5

13



1.8

SS3R4007S18

SS3R4008S18

SS3R4010S18

SS3R4011S18

SS3R4013S18

д Ø4.5
П Ø4.8



В/д \ д

7

8.5

10

11.5

13



1.8

SS3R4507S18

SS3R4508S18

SS3R4510S18

SS3R4511S18

SS3R4513S18

Д Ø5.0

П Ø6.0



В/Д \ Д

6

7

8.5

10

11.5

13



Short



2.0

SS3W5006S20

SS3W5007S20

SS3W5008S20

SS3W5010S20

SS3W5011S20

SS3W5013S20

Широкий

Д Ø6.0

П Ø6.0



В/Д \ Д

6

7

8.5

10

11.5

13



Short



2.0

SS3WB6006S20

SS3WB6007S20

SS3WB6008S20

SS3WB6010S20

SS3WB6011S20

SS3WB6013S20

Д Ø7.0

П Ø6.0



В/Д \ Д

6

7

8.5

10

11.5

13



Short



2.0

SS3WB7006S20

SS3WB7007S20

SS3WB7008S20

SS3WB7010S20

SS3WB7011S20

SS3WB7013S20

Абатменты системы SS

Стандарт



SS III
Ø3.5
Ø4.0
Ø4.5

Абатменты Стандарт

Совместимы



ComOcta



Octa



ComOcta Angled

Широкий



SS III
Ø4.5
Ø5.0

SSUltra-wide
Ø6.0
Ø7.0

Абатменты Широкий

Совместимы

Формирователь десны

- Выберите платформу совместимую с платформой имплантата
- Используйте шестигранную ручную отвертку 1.2

- R** Стандарт
- W** Широкий




Д \ В	2.0	3.0	4.0	5.0
Ø 4.8	 SSH482	 SSH483	 SSH484	 SSH485

SS SYSTEM

Д \ H	2.0	3.0	4.0	5.0
Ø 6.0	-	 SSH603	 SSH604	 SSH605

ComOcta


Слепок на уровне имплантата

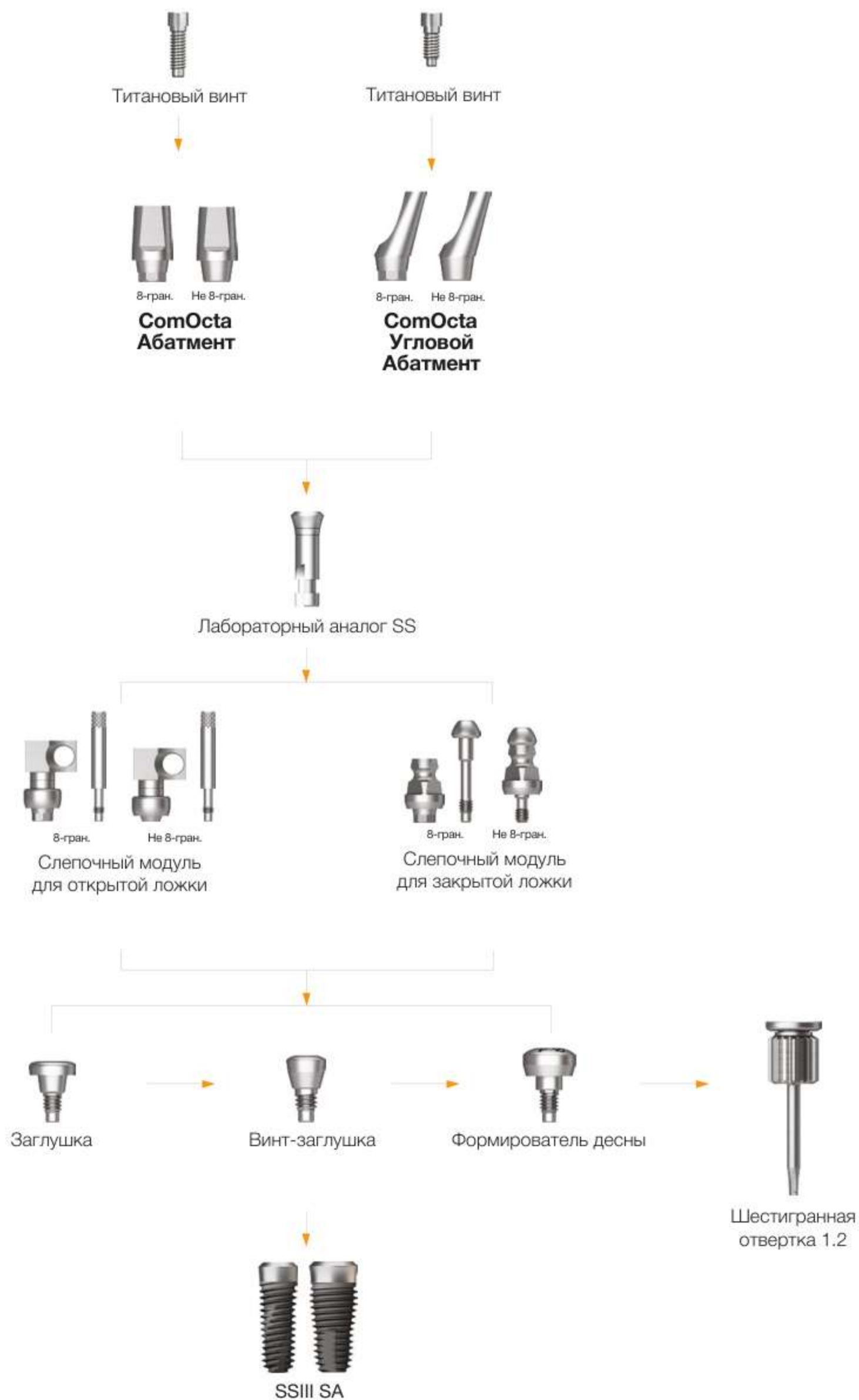

ComOcta Абатмент

- Цементный / комбинированный тип фиксации
- Оттиск на уровне имплантата
- Возможно делать оттиск с уровня абатмента при использовании ретракционного колпачка
- Для фиксации используется шестигранная отвертка 1.2
- Рекомендуемый крутящий момент: 30Нсм
- Комплектация : Абатмент + винт

Абатмент + винт
 : код + **TH** (ex : SSCA485**TH**)

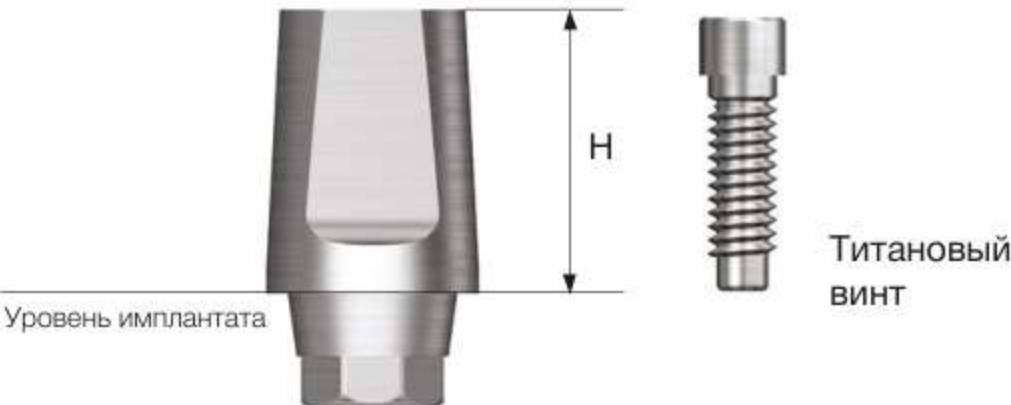

Д Ø4.8



Титановый винт
 : ASR200

В	4.0	5.5	7.0	4.0	5.5	7.0
Тип		8-гран.			Не 8-гран.	
						
	SSCA484	SSCA485	SSCA487	SSCA484N	SSCA485N	SSCA487N

Д Ø6.0



Титановый винт
 : ASR200


В	4.0	5.5	7.0	4.0	5.5	7.0
Тип		8-гран.			Не 8-гран.	
						
	SSCA604	SSCA605	SSCA607	SSCA604N	SSCA605N	SSCA607N

ComOcta Угловой Абатмент

- Цементный / комбинированный тип фиксации
- Доступная компенсация угла 15°- 20°
- Слепок с уровня имплантата
- Для фиксации используется шестигранная отвертка 1.2
- Рекомендуемый крутящий момент: 30Нсм
- Комплектация : абатмент + винт : код + TH (ex : SSA4815TH)

Абатмент + винт

: код + **TH** (ex : SSA4815**TH**)

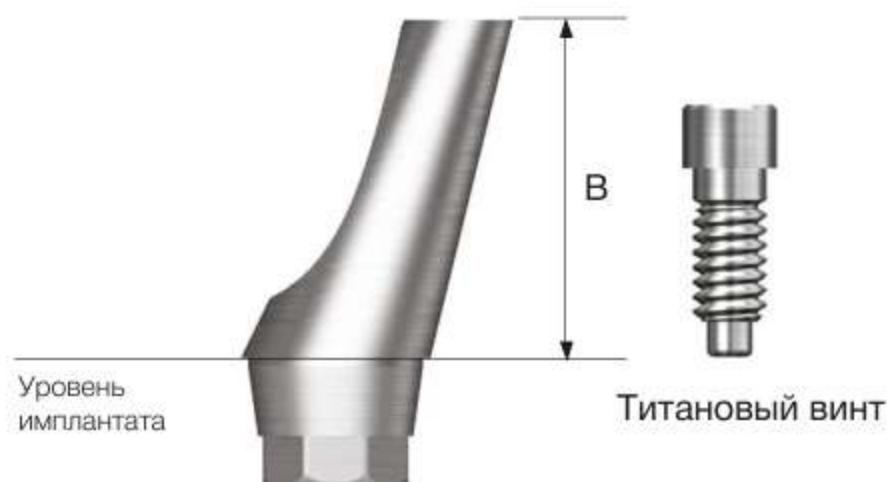

Д Ø 4.8



Титановый винт
: ASS200

Угол

15°

20°

Тип

8-гран.



SSA4815



SSA4820

Д Ø 6.0



Ti screw
: ASS200

Угол

15°

20°

Тип

8-гран.



SSA6015




SSA6020

ComOcta Абатмент Компоненты

Слепочный модуль для открытой ложки

- Уникальный дизайн позволяет слепочному модулю прочно фиксироваться в слепочном материале
- Для фиксации используется ручная шестигранная отвертка 1.2
- Комплектация : слепочный модуль + пин(*)

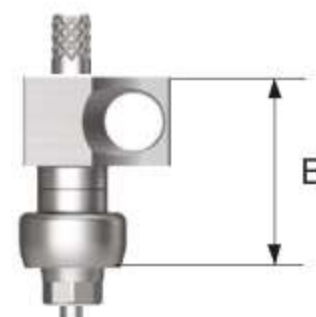

Д \ В
Тип

10

10

15

17

8-гран.



SSICA480

SSICA600



Направляющий пин



Стандарт (Серебряный)

Ø 4.8




Широкий (Голубой)

Ø 6.0

ComOcta Абатмент Компоненты

Слепочный модуль для закрытой ложки

- Удобная форма для точного позиционирования
- Для фиксации используется ручная шестигранная отвертка 1.2
- Комплектация
 - восьмигранник : слепочный модуль + пин
 - без восьмигранника : слепочный модуль

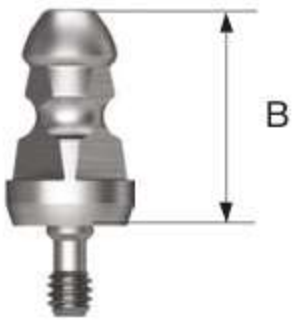

R Стандарт (Серебряный)

W Широкий (Голубой)

Д ø	Длина Тип	9.5		12.5		9.5		12.5	
		8-гран.		8-гран.		Не 8-гран.		Не 8-гран.	
Ø 4.8 Ø 6.0									
		SSCTIS480 SSCTIS600		SSCTIL480 SSCTIL600		SSCTIS480N SSCTIS600N		SSCTIL480N SSCTIL600N	

Лабораторный аналог

- Лабораторный аналог для оттисков с уровня имплантата
- Выбрать подходящую платформу; Ø4.8 или Ø6.0

R Стандарт (Серебряный)

W Широкий (Голубой)

Д ø




Ø 4.8
Ø 6.0

SSFA480
SSFA600

Octa Абатмент

Слепок с уровня абатмента

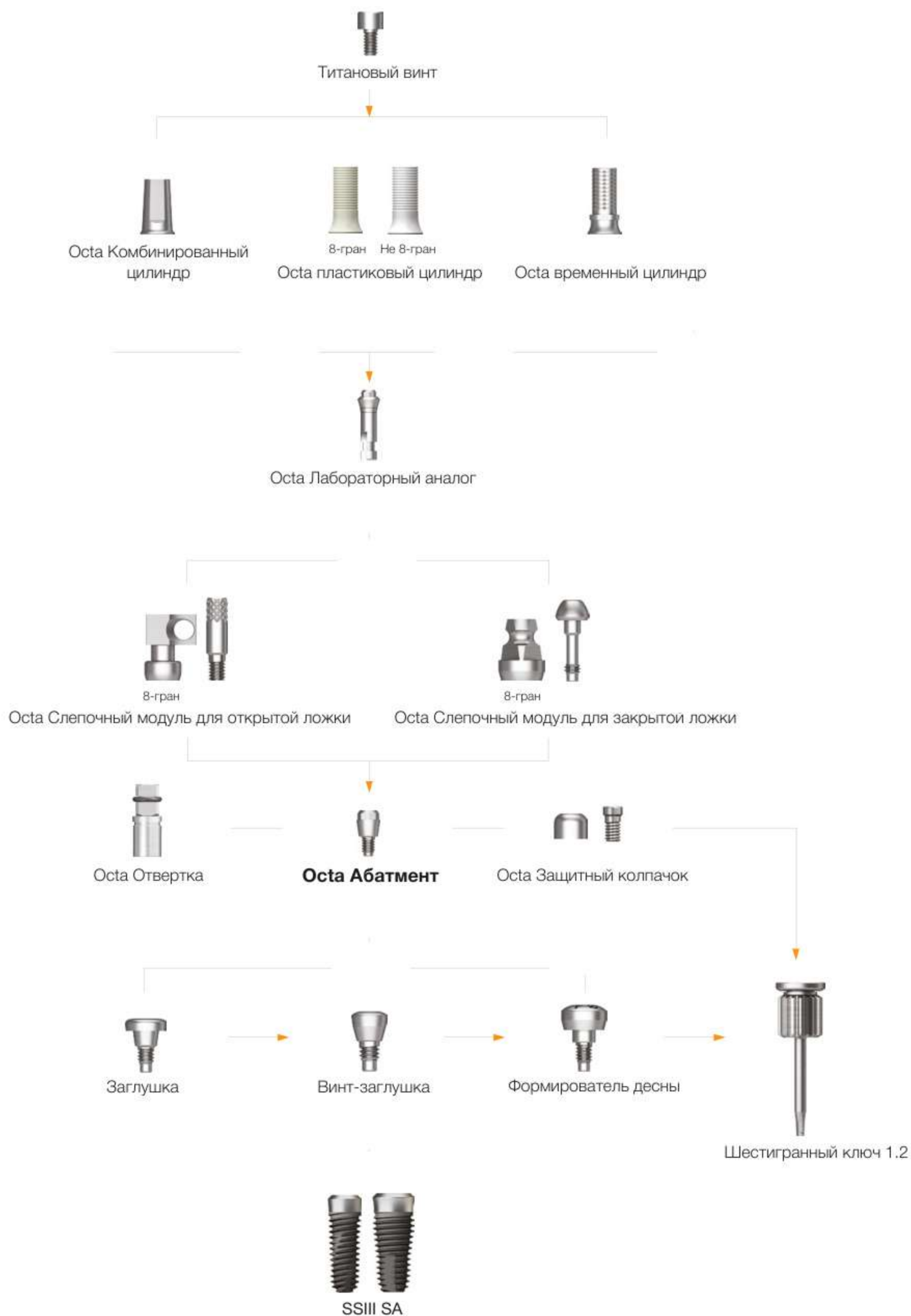

Octa Абатмент

- Винтовая фиксация цилиндров позволяет выбрать оптимальный вариант протезирования
- Угол компенсации до 60°
- Для фиксации используется специальный ключ (код: ODSL/ODSS)
- Рекомендуемый крутящий момент: 30Нсм



Д Ø 4.8



SSOA480

Д Ø 6.0



SSOA600

Octa Абатмент Компоненты

Защитный колпачок Octa

- Для фиксации используется ручная шестигранная отвертка 1.2
- Комплектация: защитный колпачок + винт

Защитный колпачок + винт

: код + **TH** (ex : SSHC480**TH**)



Стандарт



Широкий

Д Ø

Ø 4.8

Ø 6.0

Титановый винт
: SSFS (Ø 4.8 / Ø 6.0)



SSHC480

SSHC600

SS SYSTEM

Octa Комбинированный цилиндр

- Комбинированный тип фиксации
- Подходит для любого типа платформы
- Для фиксации используется шестигранная отвертка 1.2
- Рекомендуемый крутящий момент: 20Нсм
- Комплектация : цилиндр + винт цилиндра

Цилиндр + винт цилиндра

: код + **TH** (ex : SSOCC480**TH**)



Стандарт




Широкий

Д Ø

Ø 4.8

Ø 6.0

Титановый винт
: SSFS (Ø 4.8 / Ø 6.0)

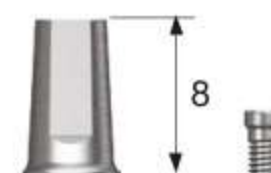

SSOCC480

SSOCC600


Octa Абатмент Компоненты

Octa Слепочный модуль для открытой ложки

- Слепочный модуль для абатмента Octa
- Для фиксации используется ручная шестигранная отвертка 1.2
- Комплектация : слепочный модуль + пин(*)

R Стандарт (Серебряный)

W Широкий (Голубой)

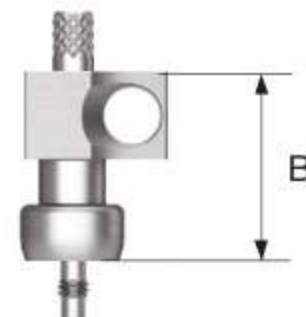

Д $\varnothing$ \ Длина 8-гран. не 8-гран.

Направляющий пин

10 15

$\varnothing$ 4.8

$\varnothing$ 6.0



SSICO480

SSICO600



SSICN480N

SSICN600N



Octa Слепочный модуль для закрытой ложки

- Для фиксации используется ручная шестигранная отвертка 1.2
- Комплектация : слепочный модуль + направляющий пин

R Стандарт (Серебряный)

W Широкий (Голубой)

Д $\varnothing$

$\varnothing$ 4.8

$\varnothing$ 6.0



SSOTI480

SSOTI600

Octa Лабораторный аналог

- Для фиксации используется ручная шестигранная отвертка 1.2

R Стандарт (Серебряный)

W Широкий (Голубой)

Д $\varnothing$

$\varnothing$ 4.8

$\varnothing$ 6.0



SSLA480

SSLA600

Оcta временный титановый цилиндр

- Временные конструкции (изготовлен из титана 3 класса)
- Для фиксации используется шестигранная отвертка 1.2
- Рекомендуемый крутящий момент: 20Нсм
- Комплектация : цилиндр + винт цилиндра

Цилиндр + винт цилиндра

: код + **TH** (ex : SSTCO480**TH**)



Д ø \ В/Д

0

2

ø 4.8


ø 6.0

Титановый винт
: SSFS (ø 4.8 / ø 6.0)



SSTCO480

SSTCO600

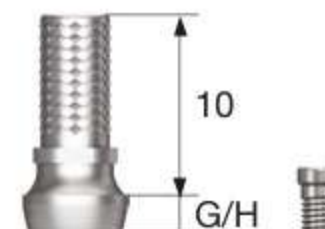

SSTCO482

SSTCO602

Оcta пластиковый цилиндр

- Винтовой тип фиксации
- Индивидуальная протезная конструкция, литье из зуботехнического сплава недорогих металлов
- Для фиксации используется шестигранная отвертка 1.2
- Рекомендуемый крутящий момент: 20Нсм
- Комплектация : цилиндр + винт цилиндра

Цилиндр + винт цилиндра

: код + **TH** (ex : SSPSO480**TH**)



Д ø \ Тип

8-гран.

Не 8-гран.

ø 4.8


ø 6.0

Титановый винт
: SSFS (ø 4.8 / ø 6.0)



SSPSO480

SSPSO600

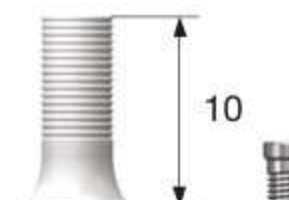

SSPSN480

SSPSN600